

IMAGE1 S™ Rubina® – новые открытия




Визуализация лимфатической системы в гинекологии с применением технологии OPAL1® NIR/ICG

- Нерадиоактивный метод обнаружения лимфатических узлов при раке шейки матки, эндометрия, вульвы или молочной железы
- Подходит для применения в нескольких дисциплинах, в том числе для лапароскопических и открытых хирургических вмешательств
- Безлазерный светодиодный источник света для белого света и возбуждения флуоресценции NIR/ICG

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

IMAGE1 S™ Rubina® – новые открытия


Видеоголовка IMAGE1 S™ 4U RUBINA™ объединяет технологию визуализации в формате 4K и флуоресцентную визуализацию индоцианина зеленого (ICG) в ближней инфракрасной области спектра. Технология OPAL1® NIR/ICG и маркер индоцианин зеленый (ICG) позволяют нерадиактивно визуализировать всю окружающую опухоль лимфатическую систему в режиме реального времени. Новые режимы отображения изображения «Наложение», «Монохромное изображение» и «Карта интенсивности» могут предоставить дополнительную информацию о сторожевом лимфатическом узле.

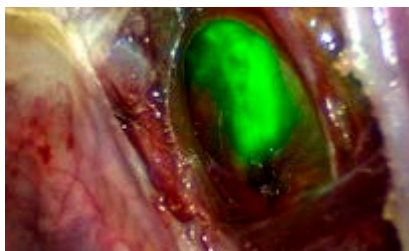

Наложение



Монохромное изображение

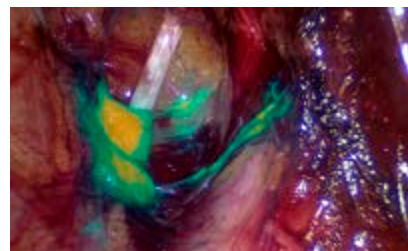

Карта интенсивности

Рекомендуемая комплектация системы IMAGE1 S™ RUBINA™	
TH121	IMAGE1 S™ 4U Rubina®, OPAL1® NIR/ICG, двухщиповая 4K UHD видеоголовка, доступны S-технологии, прогрессивная развертка, стерилизация при низких температурах, для использования с IMAGE1 S™ 4U-LINK
26606ACA	TIPCAM®1 Rubina®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, 0°
26606BCA	TIPCAM®1 Rubina®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, 30°
TC201	IMAGE1 S CONNECT® II, модуль подключения, для эксплуатации до 3 модулей связи, технология 4K, разрешение 3840 x 2160 и 1920 x 1080 пикселей
TC304	IMAGE1 S™ 4U-LINK, модуль связи, для использования с видеоголовками IMAGE1 S™ 4U, IMAGE1 S CONNECT® TC200 или IMAGE1 S CONNECT® II TC201
TL400	Источник холодного света POWER LED Rubina®, светодиодный источник света для оценки перфузии и стандартной эндоскопической диагностики, со световодным соединением KARL STORZ
UF101	Однопедальный ножной переключатель, одноступенчатый
495NCSC	Оптоволоконный световод, с прямым штекером, особо термостойкий, повышенная светопроводимость, с замком с предохранительным устройством, диаметр 4,8 мм, длина 250 см
TM350	Монитор 32" 4K/3D
Оптика ICG диаметром 5 мм и 10 мм и оптика VITOM® II ICG для хирургии вульвы и молочной железы	
26003ARA	HOPKINS® Rubina® 0°, NIR/ICG, оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 см
26003BRA	HOPKINS® Rubina® 30°, NIR/ICG, оптика переднебокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 см
26046ARA	HOPKINS® Rubina® 0°, NIR/ICG, оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см
26046BRA	HOPKINS® Rubina® 30°, NIR/ICG, оптика переднебокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см
20916025 AGA	Оптика VITOM® II NIR/ICG 0°, с встроенным осветителем и специальным фильтром для флуоресцентной диагностики с применением ICG, длина 11 см

Чтобы связаться с нами напрямую, отправьте электронное письмо на адрес gyn@karlstorz.com

Пожалуйста, узнайте заранее, по каким показаниям допущено применение соответствующего препарата в вашей стране.

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.