



Mit der VETPUMP® 2 von KARL STORZ erhalten Sie ein sicheres und höchst effektives System für das Saugen und Spülen.

Leistungsstark, präzise regelbar und sicherer als andere Geräte, ist die VETPUMP® 2 ein einzigartiges System für die Spülung und Absaugung während der Otoskopie, Gastroskopie und Laparoskopie.



Besondere Merkmale:

- Leistungsstarke Saug- und Spülpumpe sowohl für starre als auch flexible KARL STORZ Endoskope
- Kein Luftaustausch zwischen Saugund Spülflaschen, dadurch keine Kontamination der Spülflüssigkeit
- Mikroprozessor-gesteuerte Regelung, mit geringem Geräuschpegel, da die Pumpen bei Erreichen des voreingestellten Druckes automatisch abschalten

- Spüldruck und Saugvakuum sind getrennt voneinander regelbar
- Anwenderseitig eingestellte Druckwerte werden präzise umgesetzt und beim Ausschalten automatisch gespeichert.
- Universelles Handstück mit Anschluß für Katheter, Spülrohre oder direkt an den Arbeitskanal des Otoskopes
- Flaschen und Schlauchsets sind komplett autoklavierbar



Termine für geplante Workshops finden Sie unter: http://go.karlstorz.com/eventsVET





69321601

69321601

VETPUMP® 2, Betriebsspannung 100/120, 230/240 VAC, 50/60 Hz einschließlich:



Saugflasche, 1,5 I, sterilisierbar **Verschlusskappe für Saugflasche**, zur Verwendung mit Saugflasche 1,5 I, sterilisierbar



Spülflasche 1 I, sterilisierbar **Deckel,** für Spülflasche, zur Verwendung mit Spülflasche 1 I, sterilsierbar

Flaschenhalter, für Saugflasche Flaschenhalter, für Spülflasche Bakterienfilter

Netzkabel Netzkabel, US-Version

Druckgeregelt (mmHg)	Flow-geregelt (I/min)	Saugdruck (mmHg)	Betriebs- spannung	Abmessungen (B × H × T) mm	Gewicht (kg)	Bauart
max. 600	max. 3.5	geregelt: max. 580	100/120/230/240 VAC, 50/60 Hz	305 × 110 × 260	3,8	EN 61010-1

Zubehör für die Otoskopie:





Zubehör für die Abdominal/Thorax-Lavage:



steril, Packung zu 10 Stück






Silikon Schlauchset, zur Insufflation in Verbindung mit einer externen Insufflationspumpe und den Adaptern 487VE oder 69487KVE



© KARL STORZ 96182021 VET 26 8.5 08/2022/EW-D


VETPUMP® 2

Systemkomponenten für die Otoskopie

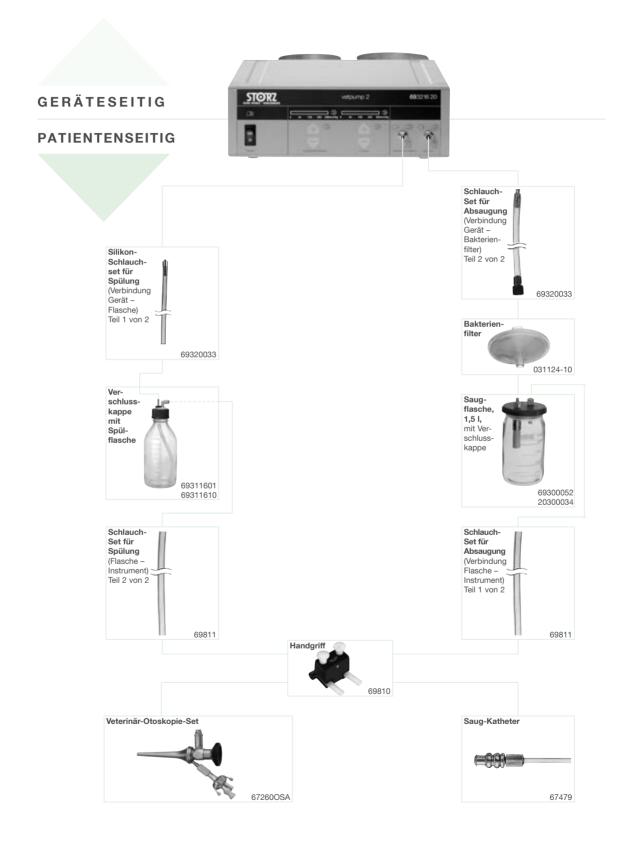

VETPUMP® 2

Systemkomponenten für die Laparoskopie / Thorakoskopie

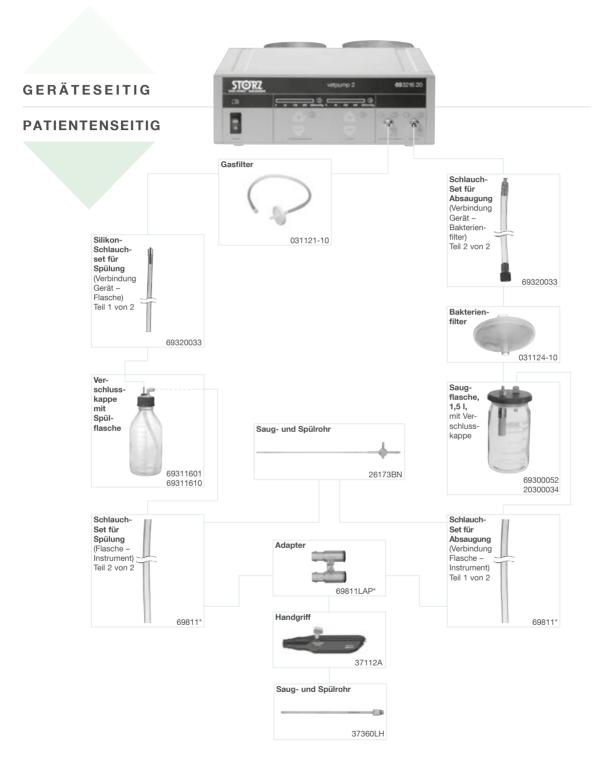


^{*} Bitte das schwarze Verbindungsstück aus Kunststoff vom Instrumentenschlauch-Set 69811 entfernen und mit Adapter 69811LAP ersetzen.

© KARL STORZ 96182021 VET 26 8.5 08/2022/EW-D

VETPUMP® 2

Systemkomponenten für die gastrointestinale Endoskopie

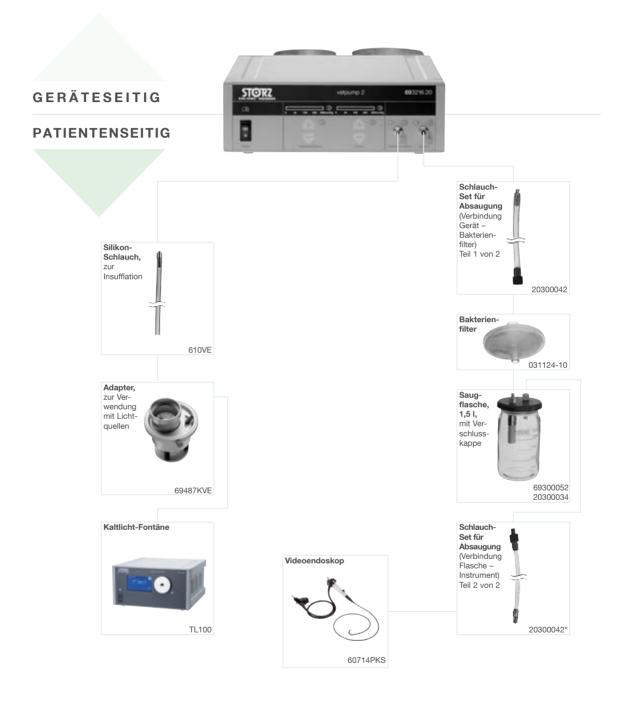

^{*} Bitte den männlichen LUER-Lock-Anschluss vom Ende des Schlauch-Sets 20300042 entfernen und das freie Ende an den Sauganschluss des Endoskops anschließen.



Shaping the Future of Endoscopy with you



THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG

Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany

Telefon: +49 7461 708-0 Telefax: +49 7461 708-105 E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com