

VETPUMP® 2

Pompe d'aspiration et
lavage vétérinaire



Le nettoyage des oreilles n'a jamais été aussi simple

La VETPUMP® 2 de KARL STORZ est un système sûr et extrêmement efficace pour l'aspiration et l'irrigation.

Puissante, dotée d'un réglage de précision et d'un niveau de sûreté supérieur à celui d'autres appareils, la VETPUMP® 2 présente les caractéristiques d'un système d'irrigation et d'aspiration hors pair pour l'otoscopie, la gastroscopie et la laparoscopie.



Caractéristiques techniques :

- Pompe d'aspiration et d'irrigation puissante pour endoscopes rigides et flexibles KARL STORZ
- Pas d'échange d'air entre les bouteilles d'aspiration et d'irrigation, donc pas de contamination par le liquide d'irrigation
- Réglage commandé par microprocesseur, avec niveau sonore bas grâce à l'arrêt automatique des pompes dès que la pression pré-réglée est atteinte
- Possibilité de réglage séparé des pressions d'irrigation et d'aspiration
- Les valeurs de pression réglées côté utilisateur sont implémentées avec précision et enregistrées automatiquement à la mise à l'arrêt
- Poignée universelle avec raccord pour cathéter, tubes d'irrigation, ou raccordement direct au canal opérateur de l'otoscope
- Bouteilles et jeu de tuyaux entièrement autoclavables

Dates et programmes de nos ateliers pratiques sur
<http://go.karlstorz.com/eventsVET>





69321601

69 3216 01

VETPUMP® 2, alimentation 100/120/230/240 VAC, 50/60 Hz
comprenant :



Bouteille d'aspiration, 1,5 l, stérilisable
Couvercle pour bouteille d'aspiration, à utiliser avec
la bouteille d'aspiration de 1,5 l, stérilisable



Bouteille d'irrigation, 1 l, stérilisable
Couvercle pour bouteille d'irrigation, à utiliser avec
la bouteille d'irrigation de 1 l, stérilisable

Porte-bouteille d'aspiration
Porte-bouteille d'irrigation
Filtre bactériologique

Câble secteur
Câble secteur, version US

Réglage de la pression (mmHg)	Réglage du débit (l/min)	Pression d'aspiration (mmHg)	Alimentation	Dimensions (l x h x p) mm	Poids (kg)	Construction
maxi 600	maxi 3,5	réglage : maxi 580	100/120/230/240 VAC, 50/60 Hz	305 x 110 x 260	3,8	EN 61010-1

Accessoires pour otoscopie :



693200 33 **Set de tuyau en silicone irrigation/ aspiration**, de l'appareil aux bouteilles



69811 **Set de tuyau pour instruments** pour raccorder les bouteilles VETPUMP® 2 et la poignée



69810 **Poignée** pour irrigation et aspiration, **autoclavable**, à utiliser avec le set 69811, des tubes d'irrigation et d'aspiration de 5 mm et des cathéters de toutes les tailles à raccord LUER-Lock



Accessoires pour lavage abdominal et thoracique :



693200 33 **Set de tuyau en silicone irrigation/ aspiration**, de l'appareil aux bouteilles



69811 **Set de tuyau pour instruments** pour raccorder les bouteilles VETPUMP® 2 et la poignée



37112 A **Poignée, droite**, avec valve de serrage, pour irrigation et aspiration, **autoclavable**, à utiliser avec les tuyaux d'aspiration et d'irrigation de 5 mm et 10 mm



69811 LAP **Adaptateur**, à utiliser avec la poignée pour irrigation et aspiration 37112 A et le set de tuyau 69811, paquet de 5



031121-10* **Filtre à gaz**, à usage unique, avec adaptateur LUER-Lock mâle pour raccord d'irrigation de l'appareil, stérile, paquet de 10



Accessoires pour gastroentéropscopie :



203000 42 **Set de tuyau en silicone** pour aspiration, stérilisable



610 VE **Set de tuyau en silicone** pour insufflation au moyen d'une pompe d'insufflation externe et de l'adaptateur 487 VE ou 69487 KVE



*




VETPUMP® 2

Composants du système pour otoscopie


CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

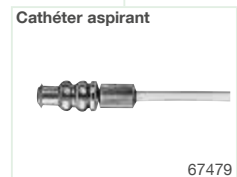

VETPUMP® 2

Composants du système pour laparoscopie/thoracoscopie

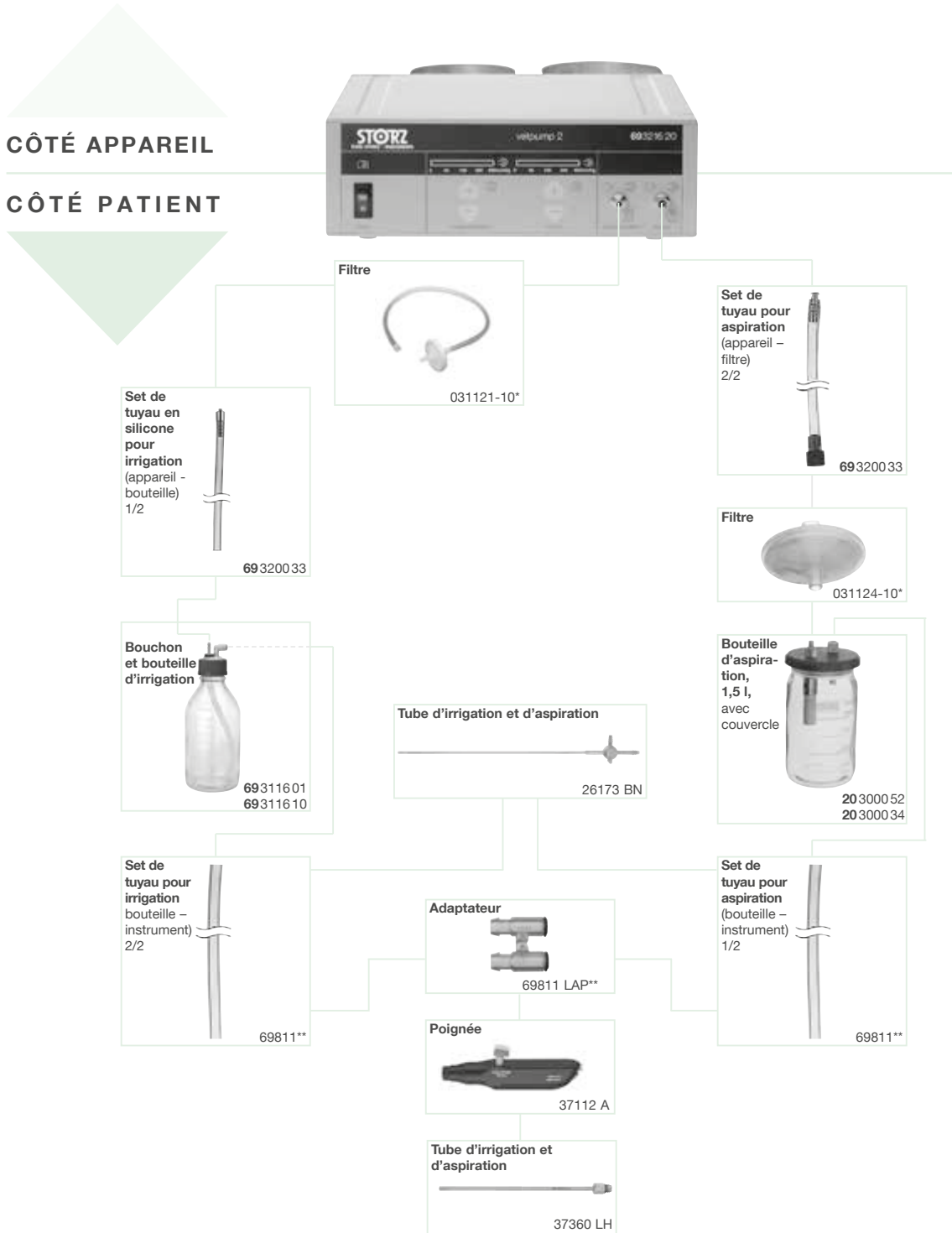

**Retirer la pièce en matière plastique de couleur noir située sur le tuyau pour instrument 69811 et la remplacer par l'adaptateur 69811 LAP avant l'utilisation.

*



VETPUMP® 2

Composants du système pour endoscopie gastro-intestinale

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT



** Retirer le raccord LUER-Lock mâle situé à l'extrémité du tuyau 20300042 avant de le relier au raccord d'aspiration de l'endoscope.



STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 (0)7461 708-0
Téléfax : +49 (0)7461 708-105
E-Mail : vet@karlstorz.com
www.karlstorz.com