

VETPUMP® 2


Sistema de irrigação
e aspiração de precisão



Lavagem auricular – tão fácil como nunca

Com a VETPUMP® 2 KARL STORZ você obtém um sistema seguro e altamente eficiente para aspiração e irrigação.

Potente, com uma regulagem precisa e mais seguro que outros aparelhos, o sistema VETPUMP® 2 é uma excelente solução para irrigação e aspiração durante otoscopias, gastroscopias e laparoscopias.

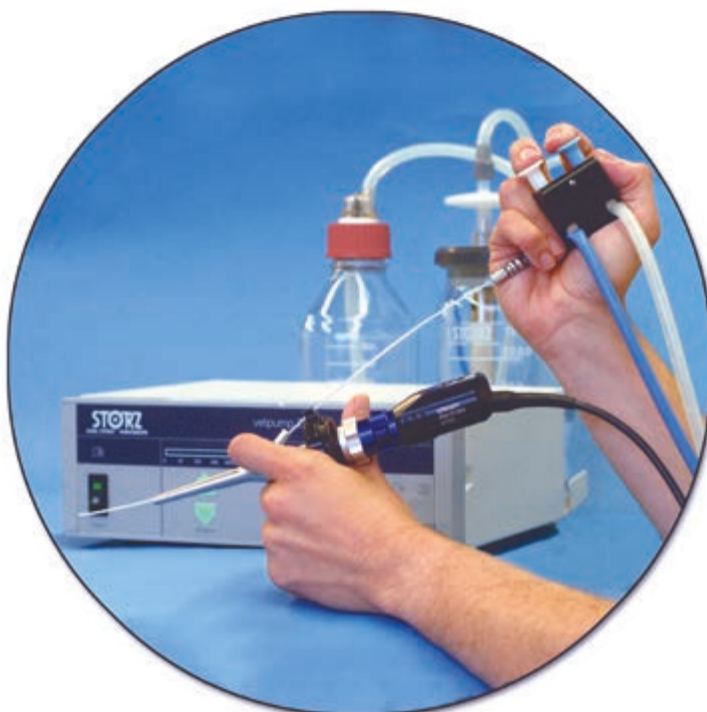

Características especiais:

- Bomba de aspiração e irrigação de alto desempenho para endoscópios KARL STORZ tanto rígidos como flexíveis
- Não há nenhuma troca de ar entre as garrafas de aspiração e de irrigação, não podendo haver assim contaminação do líquido de irrigação
- Regulagem controlada por microprocessador, com nível de ruído reduzido, uma vez que as bombas desligam automaticamente ao atingir a pressão predefinida
- A pressão de irrigação e o vácuo de aspiração podem ser regulados de maneira independente
- Os valores de pressão ajustados pelo utilizador são aplicados de forma precisa e salvos automaticamente quando a bomba é desativada
- Peça de mão universal com conexão para cateter, tubos de irrigação ou diretamente para o canal de trabalho do otoscópio
- As garrafas e os conjuntos de mangueiras são totalmente autoclaváveis

Veja as datas dos nossos próximos cursos de treinamento prático em <http://go.karlstorz.com/eventsVET>





69321601

69 321601

VETPUMP® 2, tensão de serviço 100/120/230/240 VAC, 50/60 Hz
inclui:



Garrafa de aspiração, 1,5 l, esterilizável
Tampa para garrafa de aspiração, para utilização com garrafa de aspiração de 1,5 l, esterilizável



Garrafa de irrigação, 1 l, esterilizável
Tampa para garrafa de irrigação, para utilização com garrafa de irrigação de 1 l, esterilizável

Suporte, para garrafa de aspiração

Suporte, para garrafa de irrigação

Filtro antibacteriano

Cabo de rede

Cabo de rede, modelo americano

Regulado por pressão (mmHg)	Regulado por fluxo (l/min)	Pressão de aspiração (mmHg)	Tensão de serviço	Dimensões (L x A x P) mm	Peso (kg)	Modelo
máx. 600	máx. 3,5	regulada: máx. 580	100/120/230/240 VAC, 50/60 Hz	305 x 110 x 260	3,8	EN 61010-1

Acessórios para Otoscopia:



69 320033 **Conjunto de mangueiras de silicone para irrigação e aspiração**, do aparelho para garrafas



69811 **Conjunto de mangueiras para instrumentos**, conecta garrafa VETPUMP® 2 e empunhadura



69810 **Empunhadura de irrigação e aspiração**, autoclavável, para utilização com conjunto de mangueiras 69811 juntamente com tubos de aspiração e irrigação de 5 mm e cateteres de qualquer tamanho com conexão LUER-Lock



Acessórios para lavagem abdominal/torácica:



69 320033 **Conjunto de mangueiras para irrigação e aspiração**, do aparelho para garrafas



69811 **Conjunto de mangueiras para instrumentos**, conecta garrafas VETPUMP® 2 a empunhadura



37112A **Empunhadura**, reta, válvula de aperto, para aspiração e irrigação, **autoclavável**, para utilização com tubos de aspiração e irrigação de 5 mm e 10 mm



69811LAP **Adaptador**, para utilização com empunhadura de aspiração e irrigação 37112A e conjunto de mangueiras para instrumentos 69811, embalagem com 5 unidades



031121-10 **Filtro de gás**, descartável, com conexão LUER-Lock macho para anexar à conexão de irrigação no aparelho, estéril, embalagem com 10 unidades



Acessórios para Gastroenteroscopia:



20 300042 **Conjunto de mangueiras de silicone**, para aspiração, esterilizável



610VE **Conjunto de mangueiras de silicone**, 60 cm de comprimento, com conexão LUER-Lock macho, para utilização com adaptadores VETPUMP® 487VE ou 69487KVE




VETPUMP® 2

Componentes do sistema para Otoscopia

LADO DO APARELHO

LADO DO PACIENTE

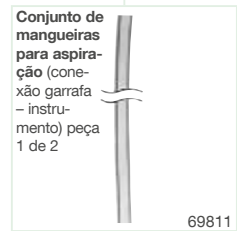


VETPUMP® 2

Componentes do sistema para Laparoscopia / Toracoscopia

LADO DO APARELHO


LADO DO PACIENTE

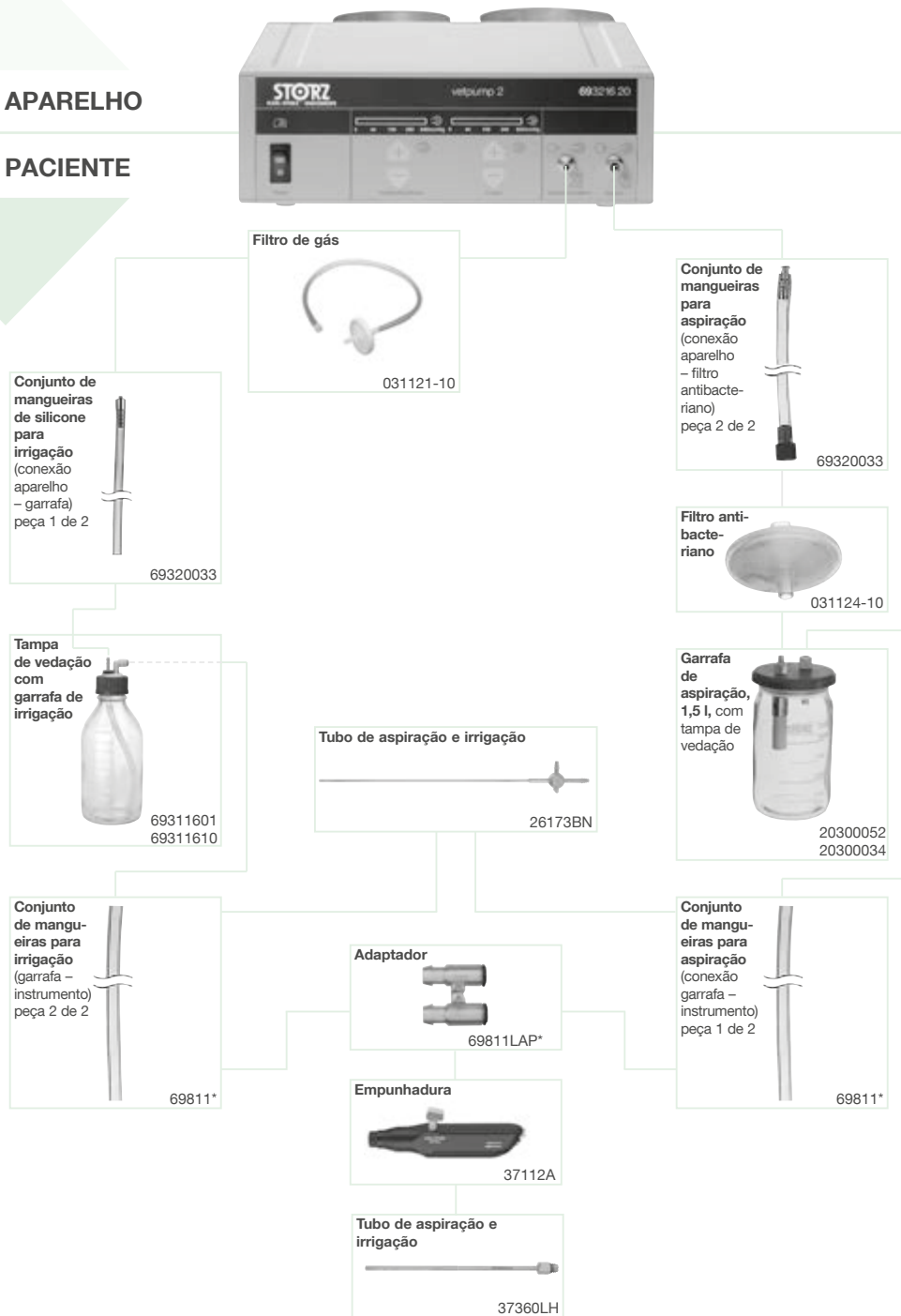

* Favor retirar a peça de conexão de plástico preta do conjunto de mangueiras para instrumentos 69811 e substituí-la pelo adaptador 69811LAP.

VETPUMP® 2

Componentes do sistema para Endoscopia Gastrointestinal

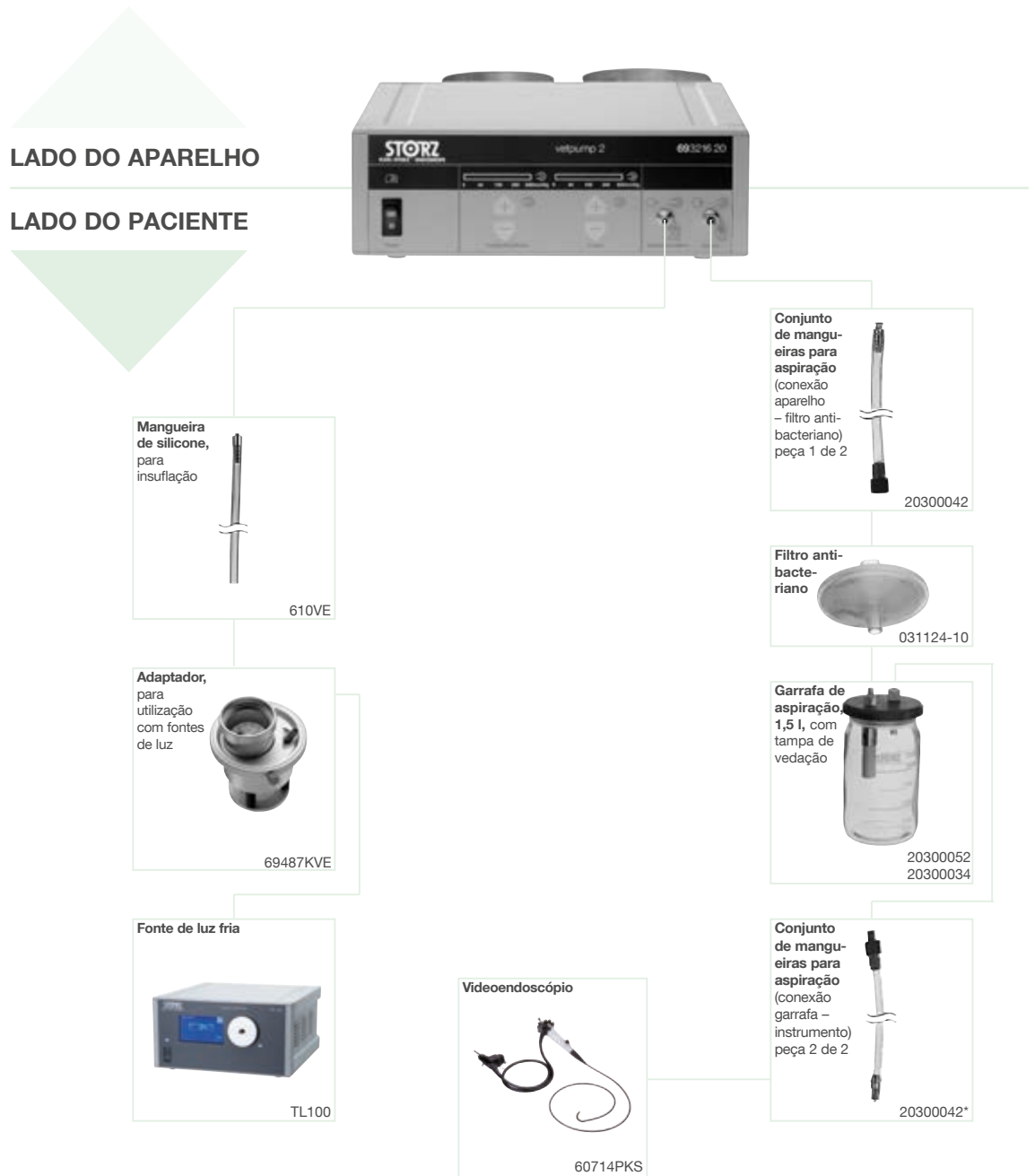

* Favor retirar a conexão LUER-Lock macho da extremidade do conjunto de mangueiras 20300042 e conectar a extremidade livre na conexão de aspiração do endoscópio.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemanha
Tel.: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com

