

Fibrosopes pour petits animaux avec longueurs spécifiques et petit diamètre



Fibrosopes avec petit diamètre

Caractéristiques particulières :

- Spécialement adaptées au secteur vétérinaire, les dimensions de ce fibroscope plus long et plus fin facilitent les applications chez de nombreux animaux de toute taille
- Le grand angle de vision et la bonne mobilité de l'extrémité distale favorisent l'orientation
- Canal opérateur destiné aux instruments chirurgicaux, à l'aspiration, l'insufflation ou l'irrigation
- Étanche et entièrement immergeable dans des solutions de désinfection
- Test d'étanchéité simple
- Stérilisable aux gaz EtO, FO, Steris® et Sterrad®
- Excellente qualité optique de l'objectif et du faisceau de conduction de la lumière
- Longue durée de vie de l'instrument garantie par une construction résistante et une mécanique robuste



Dates et programmes de nos ateliers pratiques sur
<http://go.karlstorz.com/eventsVET>



Nouvelle
qualité
d'image

Fibroscope spécial

Transmission de l'image améliorée pour plus de brillance et de précision

Cet instrument est utilisable aussi bien pour l'urétéro-cystoscopie chez les chiens mâles que pour la bronchoscopie, rhinoscopie et postrhinoscopie chez les petits animaux. Le petit diamètre et la longueur spécifique facilitent non seulement la pratique de cystoscopies transurétrales chez les chiens mâles mais permettent également d'effectuer des examens des portions les plus distales du système respiratoire inférieur.



60003VBK1 **Fibroscope spécial**

Béquillage :	180°/100°
Direction de visée :	0°
Angle d'ouverture :	90°
Diamètre int. canal opérateur :	1,2 mm
Diamètre ext. extrémité distale :	3 mm
Longueur utile :	100 cm


Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Bouchon de régulation de pression pour éviter le surpression lors de la stérilisation au gaz

Vérificateur d'étanchéité, avec poire et manomètre

Brosse de nettoyage, ronde, souple

Mallette

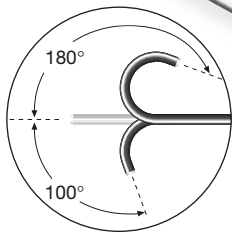

Accessoires optionnels :



60275ZE

Pince à biopsie, en forme de cuillère, ovale, deux mors mobiles, 3 Charr., souple, longueur 120 cm



60275FE

Pince à préhension, deux mors mobiles, 3 Charr., longueur 120 cm



27023TD

Sonde à panier, nitinol, à pointe hélicoïdale, 2,5 Charr., longueur 120 cm, 4 fils, diamètre du panier collecteur 16 mm, stérile, à usage unique

Bronchoscopie chez les chats

Pour bronchoscopie, rhinoscopie et post-rhinoscopie de routine chez les chiens et les chats. La nouvelle longueur utile et le petit diamètre de cet instrument permettent au vétérinaire d'accéder aux zones les plus éloignées de l'arbre bronchique des chats et des chiens afin de pratiquer des examens visuels approfondis et des prélèvements par lavage broncho-alvéolaire dans les portions distales du système respiratoire. Le risque de ne pas détecter d'éventuelles altérations ou corps étrangers, dont la présence passerait inaperçue au moyen d'endoscopes plus courts, est ainsi réduit.



60002VBK2	Broncho-fibroscope pour examen bronchoscopique de routine et post-rhinoscopie chez les chats et les petits chiens
Béquillage :	210°/130°
Direction de visée :	0°
Angle d'ouverture :	90°
Diamètre int. canal opérateur :	1,5 mm
Diamètre ext. extrémité distale :	3,7 mm
Longueur utile :	65 cm
Longueur totale :	91 cm

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Bouchon de régulation de pression pour éviter la surpression lors de la stérilisation au gaz

Vérificateur d'étanchéité, avec poire et manomètre

Brosse de nettoyage, ronde, souple


Valve d'aspiration, réutilisable

Valve d'aspiration, à usage unique, paquet de 5

Adaptateur de nettoyage, réutilisable

Adaptateur pour robinet deux-voies

Mallette

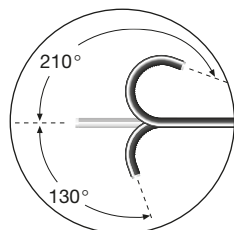

Accessoires optionnels :



60275ZE **Pince à biopsie**, en forme de cuillère, ovale, deux mors mobiles, 3 Charr., souple, longueur 120 cm



60275FE **Pince à préhension**, deux mors mobiles, 3 Charr., longueur 120 cm




27023TF **Sonde à panier**, nitinol, à pointe hélicoïdale, 3 Charr., longueur 120 cm, 4 fils, diamètre du panier collecteur 16 mm, stérile, à usage unique



27023Y **Brosse de cytologie**, 3 Charr., non stérile, à usage unique, paquet de 5


Bronchoscopie chez les chiens

Pour bronchoscopie, rhinoscopie et post-rhinoscopie de routine chez les chiens et les chats. Plus longs que les bronchoscopes en médecine humaine, les fibroscopes vétérinaires facilitent l'examen des patients de grande taille. Le canal opérateur permet d'effectuer des biopsies, des prélèvements par irrigation, des prélèvements cytologiques ou d'extraire des corps étrangers.

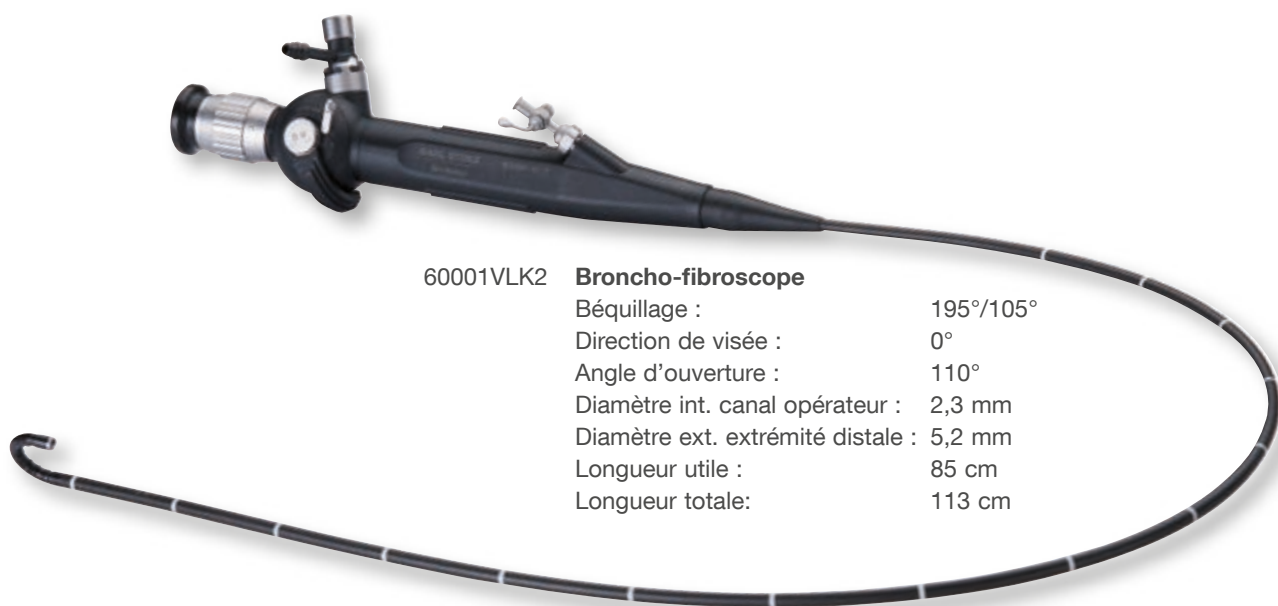

60001VLK2 **Broncho-fibroscope**

Béquillage :	195°/105°
Direction de visée :	0°
Angle d'ouverture :	110°
Diamètre int. canal opérateur :	2,3 mm
Diamètre ext. extrémité distale :	5,2 mm
Longueur utile :	85 cm
Longueur totale:	113 cm

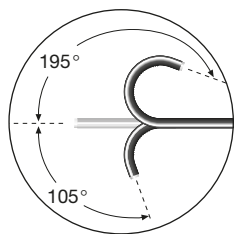

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison :

Bouchon de régulation de pression pour éviter la surpression lors de la stérilisation au gaz

Vérificateur d'étanchéité, avec poire et manomètre

Brosse de nettoyage, souple

Valve d'aspiration, réutilisable

Valve d'aspiration, à usage unique, paquet de 5

Adaptateur de nettoyage, réutilisable

Adaptateur pour robinet deux-voies

Mallette

Accessoires optionnels :



60001KL

Pince à biopsie, en forme de cuillère, ronde, diamètre 1,7 mm, longueur 120 cm



60002KS

Pince à préhension, deux mors mobiles, souple, diamètre 1,7 mm, longueur 120 cm



60725TM


Tuyau extérieur, diamètre 1,8 mm, longueur 180 cm, à utiliser dans un canal opérateur de 2 mm minimum



60007BL

Brosse de cytologie, diamètre 1,8 mm, longueur 120 cm, comprenant:
Tuyau extérieur et poignée

Notes

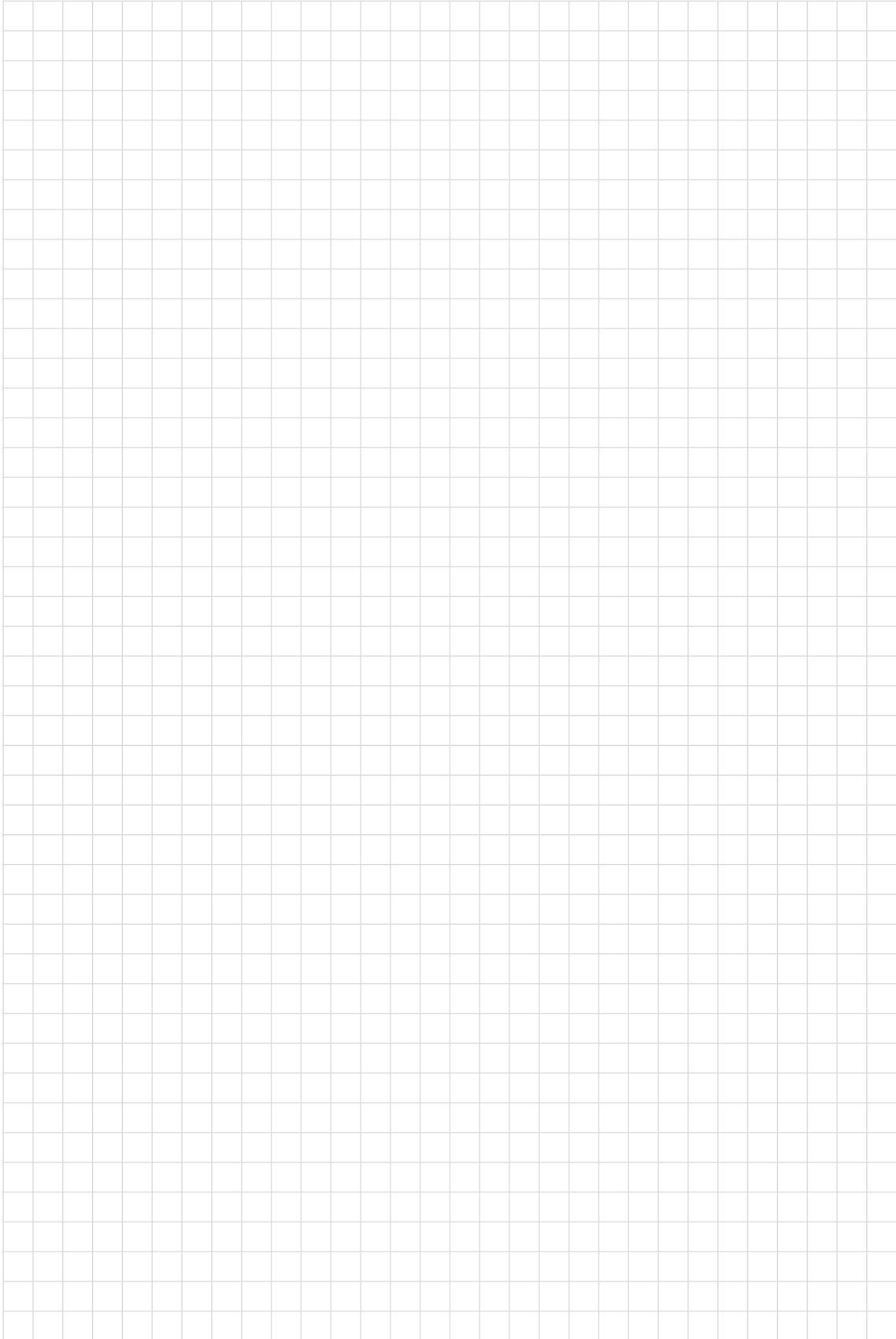

Notes



Plus de
75
ans

*Plus de 75 ans que nous
façonnons l'avenir de
l'endoscopie avec vous*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Fax : +49 7461 708-105
E-Mail : vet@karlstorz.com
www.karlstorz.com