Sistemi LAPspay® per cani e gatti Ovariectomia / ovarioisterectomia laparoscopica Tecnica multiportale







© KARL STORZ 96182027 VET 32 9.2 01/2023/EW-IT

LAPspay® tecnica multiportale

Laparoscopio standard



62046AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°,

immagine ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 29 cm, **autoclavabile,** con fibre ottiche incorporate,

codice colore: verde

Cannula TERNAMIAN ENDOTIP



60120MS Cannula TERNAMIAN ENDOTIP, con filettatura,

senza rubinetto per insufflazione, misura 6 mm,

lunghezza operativa 6,5 cm codice colore: nero-bianco

incluso:

Valvola a becco in silicone

60120MSS Idem, con rubinetto di insufflazione

Trocar di peso ridotto - Cannula con filettatura



62160GSK **Trocar,** con punta affilata, con attacco LUER-Lock per

insufflazione, misura 6 mm, lunghezza operatica 6 cm,

codice colore: nero-verde

incluso:

Cannula, con filettatura

Mandrino

Valvola a becco in silicone

62160GBK Idem, con punta smussa

LAPspay® tecnica a singolo portale



26034AAV

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, con visione parallela, Ø 10 mm, lunghezza 23 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e canale operativo di 6 mm, incluso adattatore con valvola a becco in silicone 26034V

Cannula TERNAMIAN ENDOTIP, con valvola multifunzionale



60103TMR

Cannula TERNAMIAN **ENDOTIP,** con filettatura e rubinetto d'insufflazione girevole, misura 11 mm, lunghezza operativa 10,5 cm, codice colore: verde incluso:

Valvola multifunzionale
Set guarnizioni 60/10
Stelo di apertura, per valvola a cerniera

Trocar standard e cannula



62103FZ

Trocar, misura 11 mm, codice colore: verde

incluso:

Mandrino, con punta piramidale **Cannula,** senza valvola, con rubinetto per insufflazione, lunghezza operativa 8,5 cm

Valvola automatica a cerniera




62141DB

Riduttore, 11/5 mm

A prescindere che si preferisca la tecnica a portale singolo o multiplo, l'ovariectomia e l'ovarioisterectomia mini-invasiva con un sistema operatorio KARL STORZ LAPspay® offre i seguenti vantaggi:

- Sistema ottico eccellente per un'immagine nitida, chiara e ingrandita
- Meno doloroso per gli animali trattati, in quanto il tessuto non viene lacerato, ma viene cauterizzato e separato con precisione
- Le complicanze, come deiscenza della lesione, residui ovarici e legature ureterali, vengono ridotte al minimo
- Rischio d'infezione minimizzato, in quanto la cavità addominale viene esposta solo in minima parte
- Breve convalescenza grazie alle dimensioni ridotte del taglio
- Clienti soddisfatti che si aspettano il meglio per i propri animali domestici
- Ingrandimento dello studio dell'ambulatorio per offrire nuovi servizi conformi ai nuovi standard di ricerca
- Possibilità di miglioramento delle capacità laparoscopiche che possono essere applicate a numerose tecniche di chirurgia mini-invasiva

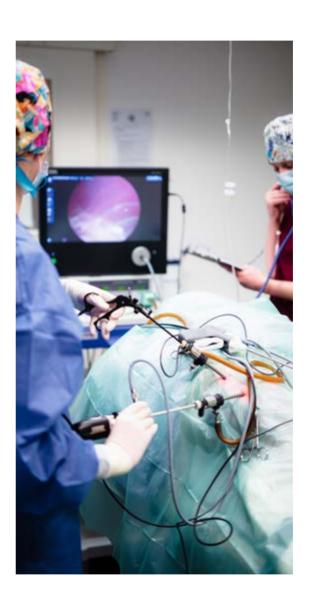

Pinze da presa, 5 mm



66322MG

Pinza da presa CLICKLINE, "a muso di tigre", girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, una ganascia mobile, 2 x 4 denti, per la presa e il distacco di organi solidi, misura 5 mm, lunghezza 36 cm incluso:

Impugnatura di materiale sintetico, con dispositivo di arresto Camicia esterna in metallo, isolata Inserto pinza

33422MG Idem, lunghezza 43 cm

Pinze bipolari, 5 mm



66351DN

ROBI PLUS®, girevole, con attacco per coagulazione bipolare, funzione di taglio integrata, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 35 cm incluso:

Impugnatura ad anello, bipolare, con dispositivo di attivazione funzione di taglio

Camicia esterna, isolata, lunghezza 35 cm
2x Camicia del bisturi con lama integrata, si consiglia il monouso, lunghezza 35 cm
Inserto pinza, lunghezza 35 cm

66451DN Idem, lunghezza 42 cm

Camicie del bisturi per ROBI PLUS®



Camicia del bisturi con lama integrata,

si consiglia il monouso, lunghezza 35 cm, per impiego con strumento bipolare ROBI PLUS® 66351DN

66400M

Idem, lunghezza 42 cm, per impiego con strumento bipolare ROBI PLUS® 66451DN

© KARL STORZ 96182027 VET 32 9.2 01/2023/EW-IT

Strumenti supplementari



62175H Uncino per ovariectomia sec. TANKERSLEY,

con impugnatura robusta, per uso percutaneo,

lunghezza operativa 8,5 cm

Idem, con uncino piccolo, per impiego nei cani di 62175HK

piccola taglia e nei gatti



62120J Cannula per pneumoperitoneo sec. VERESS, con cannula interna smussa a molla, LUER-Lock,

autoclavabile, Ø 2,1 mm, lunghezza 10 cm

Insufflatore



62432501 ENDO-ARTHROFLATOR VET di CO2,

> tensione d'esercizio 100 - 240 VAC, 50/60 Hz incluso:

Set di tubi in silicone, sterilizzabili Chiave universale

Filtro di gas, sterile, monouso,

confezione da 10 pezzi

Il tubo per alta pressione e i flaconi di CO2 devono essere ordinati separatamente. Consultare il catalogo di Endoscopia in medicina veterinaria, animali di piccola taglia.

© KARL STORZ 96182027 VET 32 9.2 01/2023/EW-IT

Elettrochirurgia

AUTOCON® III VET



L'unità AUTOCON® III VET è un elettrobisturi ad alta frequenza versatile che si può impiegare in numerosi interventi chirurgici sia nella modalità unipolare che bipolare. La nuova modalità BIVASCUARSAFE consente di sigillare i vasi con diametro massimo di 7 mm. L'unità AUTOCON® III VET è ideale per una coagulazione, un taglio e una sigillatura precisi dei vasi sia in interventi endoscopici che in chirurgia aperta.

KARL STORZ offre per AUTOCON® III VET una serie di strumenti per molte applicazioni di medicina veterinaria.



UH301E

AUTOCON® III VET, BIVASCULAR, tensione d'esercizio 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, incluso cavo di rete

Prese di attacco HF unipolari:

presa tipo USA da 3 pin

KARL STORZ/Erbe VIO da 5 mm

Prese di attacco HF bipolari:

tipo USA a 2 pin (28.58 mm) 2x KARL STORZ/Erbe VIO

Posto presa:

elettrodo neutro da 2 poli

Integrabile in OR1™ con KARL STORZ OR1™

SCB control WU300.

Requisiti di sistema: relase software SCB R-UI 20090001-46

e versioni più recenti.

UH301U Idem, tensione d'esercizio 100 - 127 VAC

Strumento di sigillatura vascolare per impiego con AUTOCON® III VET



60651VS

BIVASCULAR VET, strumento di sutura laparoscopica, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 34 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Interruttore a pedale opzionale



UF902

Interruttore HF a doppio pedale, con tasto per funzione di commutazione, per impiego con generatori HF

Per un compendio degli strumenti e dei cavi per alta frequenza per impiego con AUTOCON® III VET consultare il catalogo di *Endoscopia in medicina veterinaria, animali di piccola taglia* e ENDOWORLD® VET 42, AUTOCON® III VET.







Shaping the Future of Endoscopy with you



THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG

Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania

Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania

Telefono: +49 7461 708-0 Telefax: +49 7461 708-105 E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com