

## Endoscopie dentaire équine




## Endoscopie dentaire équine: Visibilité et documentation de la cavité buccale

L'emploi d'un endoscope pour examiner, nettoyer et rincer la cavité buccale ainsi que pour l'extraction et tout autre soin dentaire chez le cheval permet d'une part, de visualiser en détail les zones à traiter et d'autre part, de documenter les résultats obtenus. Cet endoscope dentaire conçu pour les applications intrabuccales est doté d'une longueur de 44 cm et d'un angle de visée de 70°.

Le raccord de lumière rotatif à 340° et le raccord d'irrigation rotatif à 360° situé sur la chemise d'irrigation permettent d'effectuer examen et traitement dans des conditions confortables.

Étanche, l'endoscope est immergeable sans aucun risque dans des solutions de nettoyage et de désinfection.

Il existe deux chemises différentes pour l'endoscope dentaire. La chemise de protection sert à protéger l'endoscope durant l'examen tandis que la chemise d'irrigation permet d'acheminer du liquide dans la cavité buccale afin de faciliter le nettoyage des espaces interdentaires.

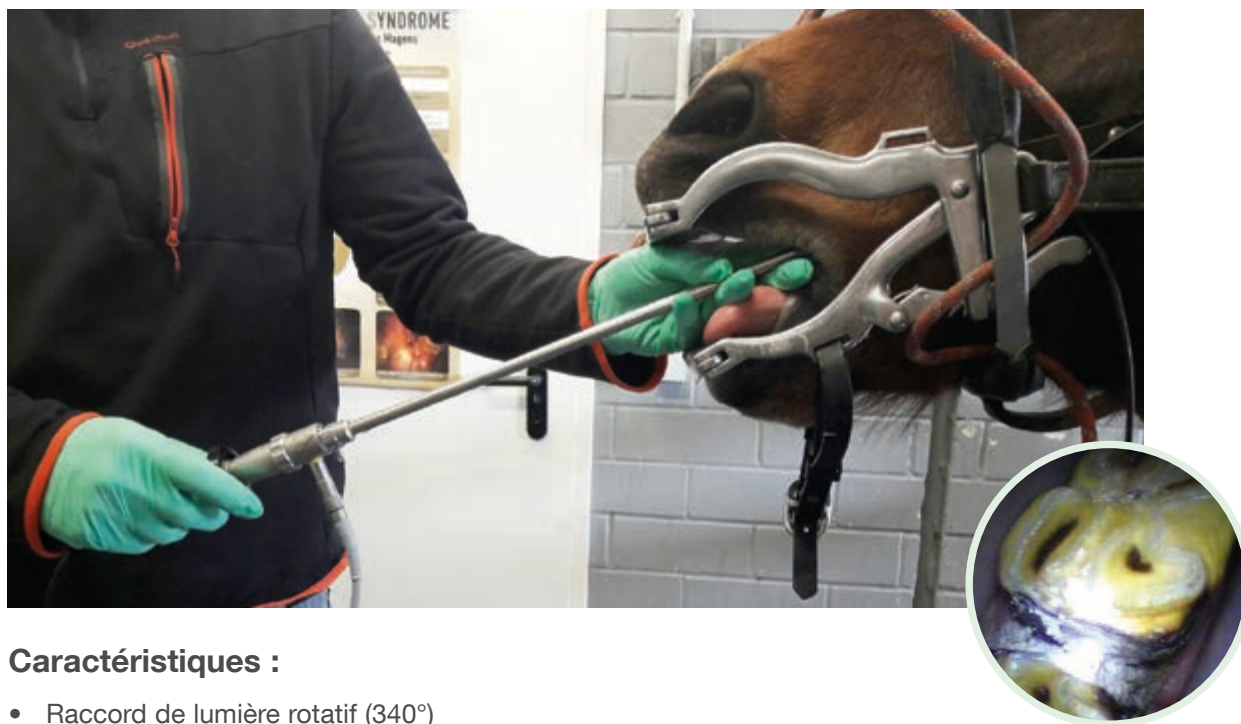

### Caractéristiques :

- Raccord de lumière rotatif (340°)
- Immergeable pour nettoyage et désinfection, aucun risque de fuite lors des examens
- Construction robuste
- Nouvelles dimensions pour plus d'ergonomie et de maniabilité
- Raccord d'irrigation rotatif (360°)
- Deux chemises : chemise de protection (66490CQ) et chemise d'irrigation (66490CS)



66490CF **Optique dentaire**, direction de visée 70°, angle d'ouverture 90°, diamètre 8 mm, longueur utile 440 mm A utiliser avec la chemise de protection 66490CQ et la chemise d'irrigation 66490CS



66490CQ **Chemise de protection**, avec robinet d'irrigation pour rincer la lentille de l'optique 66490CF



66490CS **Chemise d'irrigation**, orifice d'irrigation distal de diamètre 1,5 mm, raccord d'irrigation avec robinet rotatif à 360°, raccord de lumière rotatif à 340°, longueur utile 440 mm, à utiliser avec l'optique dentaire 66490CF

L'utilisation d'une caméra fournit des images détaillées et permet de documenter les résultats obtenus suite à l'auscultation. Les systèmes de caméra portables KARL STORZ TELE PACK et C-CAM® constituent l'équipement approprié aux applications endoscopiques dentaires équine.



More than  
**75**  
Years

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne  
Téléphone : +49 7461 708-0  
Téléfax : +49 7461 708-105  
E-Mail : [vet@karlstorz.com](mailto:vet@karlstorz.com)

[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)

