


Inyección intracordal de grasa autóloga primaria

Recuperación de la voz tras una cordectomía
endoscópica




Recuperación de la voz funcional tras una cordectomía endoscópica en los casos de carcinoma de laringe

La cordectomía consiste en la extirpación parcial o total de una cuerda vocal y constituye un método de tratamiento habitual en los casos de carcinomas en las cuerdas vocales. Para recuperar posteriormente las cuerdas vocales resulta necesaria su reconstrucción con material sintético o autólogo. En el método PIAFI se extrae grasa autóloga de la pared abdominal del paciente y a continuación se inyecta en el restante de las cuerdas vocales con la ayuda de la jeringa de alta presión de PERETTI. Gracias a su mecanismo de rueda dentada integrado es posible realizar una inyección exacta de la grasa corporal extraída.

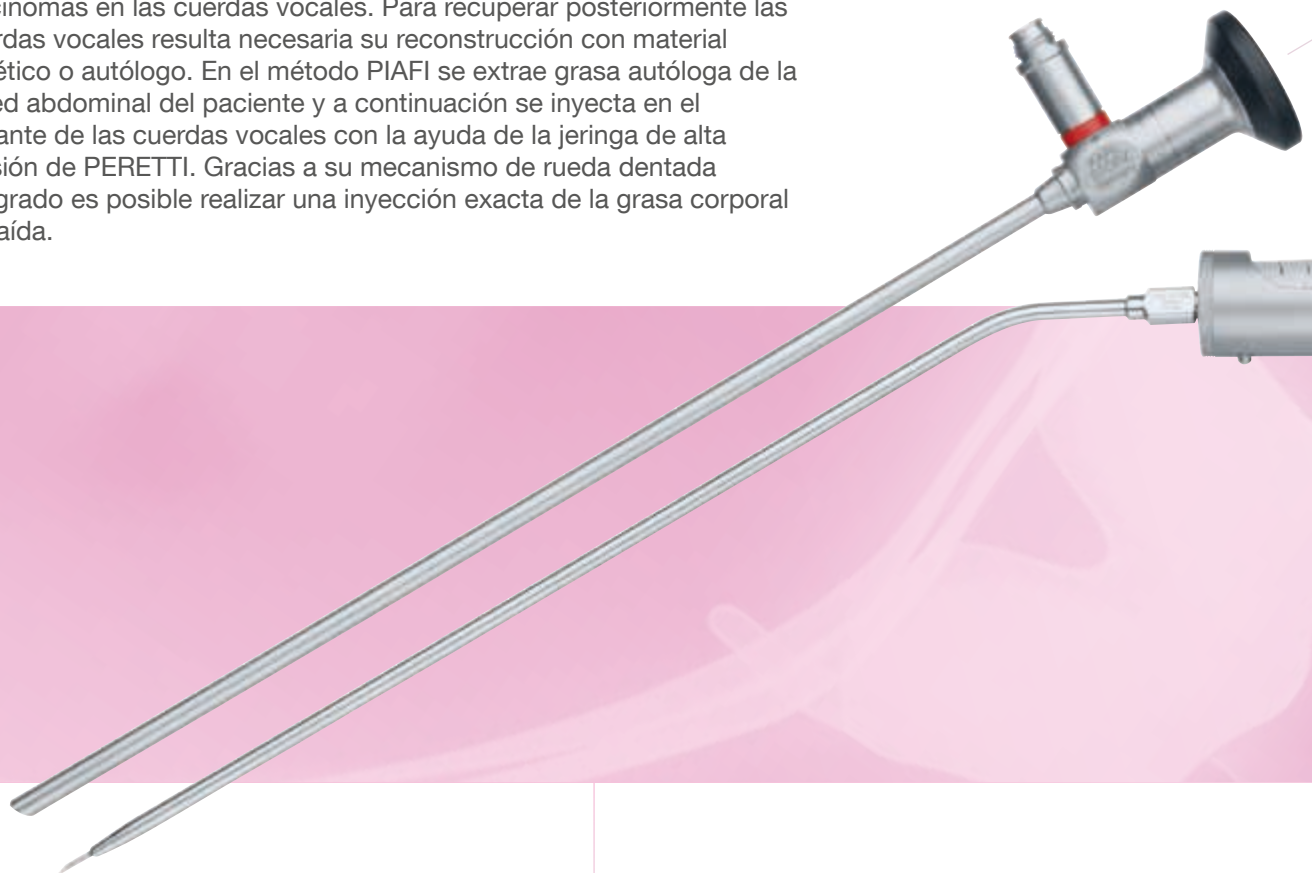


Agujas de inyección disponibles con dos modelos distintos

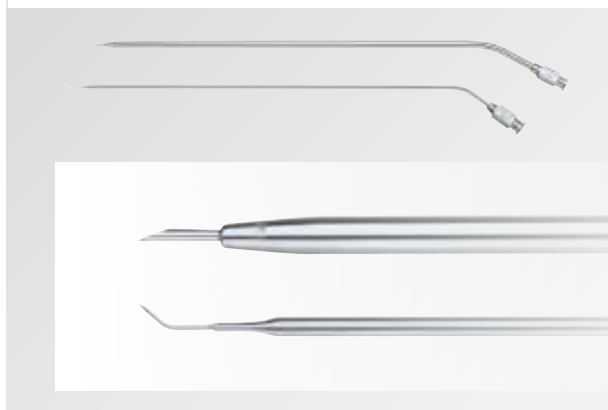

Construcción metálica reutilizable



El aumento de las cuerdas vocales se lleva a cabo bajo control videoendoscópico y visión próxima de la posición correspondiente de inyección. De este modo se evita que la aguja de inyección obstaculice el campo de visión.

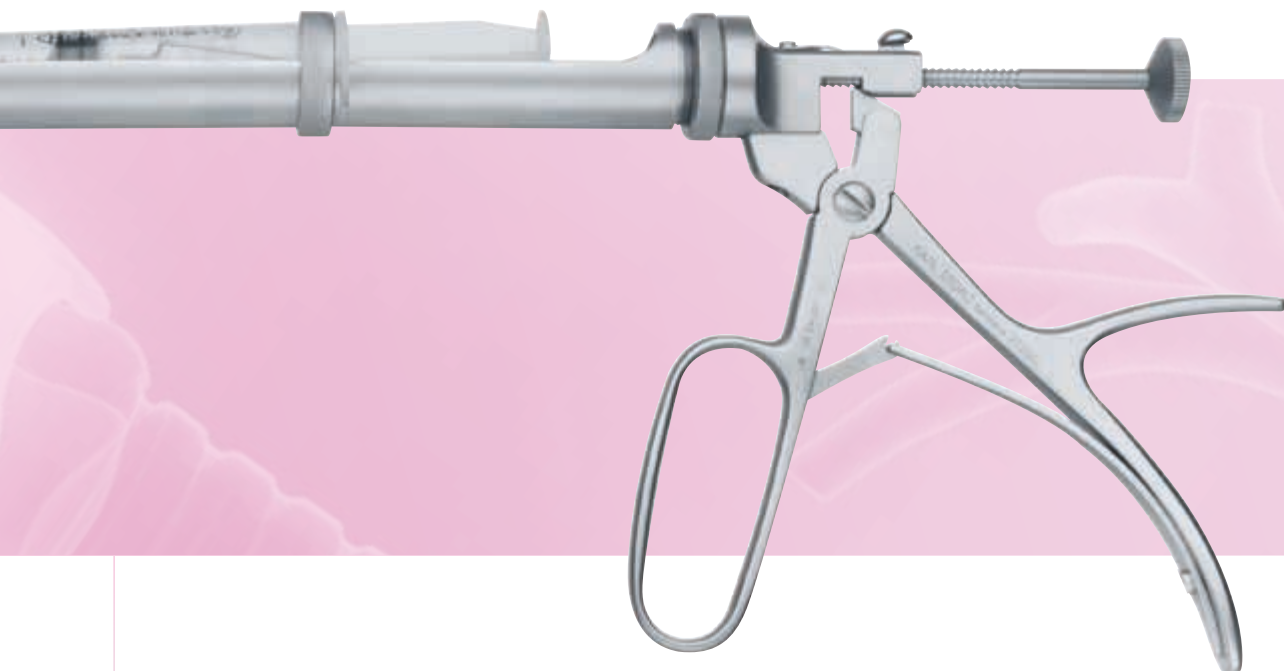

Dosificación exacta de la inyección mediante el mecanismo de rueda dentada



Las ventajas de un vistazo

- Restauración de la masa de la cuerda vocal reseccionada
- Reducción del riesgo de rechazo
- Coste reducido
- Por regla general solo es necesaria una intervención

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.



La evolución continúa

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com