


Das Ende der Steinzeit – CALCULASE® III



CALCULASE® III – Das Ende der Steinzeit

35-W-Holmium-Laser

Der neue 35-Watt-Desktop-Laser „CALCULASE® III“ von KARL STORZ bietet dem Anwender eine erhöhte Leistung sowie einen optimalen Bedienkomfort mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

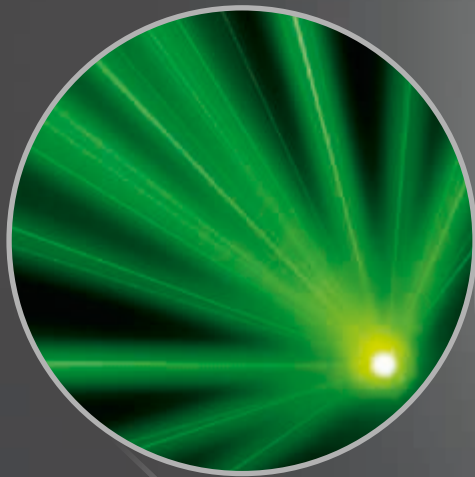

Fasern

- Laserfasererkennung durch RFID
- Rückwärtskompatibilität der Fasern zum CALCULASE® II → volle Leistung beim CALCULASE® II auch mit der dünnsten Faser
- Single-Use- und wiederverwendbare Fasern (230 µm, 365 µm, 600 µm)



Power

- Leistung: max. 35 W
- Energie: max. 4 Joule
- Frequenz: max. 30 Hertz



Anwendungsgebiete

Der CALCULASE® III ist vielseitig einsetzbar.

Lithotripsieanwendungen:

- Urologie (Steine in Niere, Harnleiter oder Blase)
- ZMKG (Steine im Speichelkanal, in den Speicheldrüsen)
- Laparoskopie (Steine im Gallengang, in der Gallenblase)

Weichgewebebehandlungen:

- Urologie
- Gastroenterologie
- HNO/ZMKG
- Arthroskopie



Sonstige Features

- Optimierte Pulsmodi
 - Kurz: für eine bessere Steinfragmentierung
 - Lang: für ein effizientes Dusting
 - Burst: zur Verringerung der Steinrepulsion
- 10"-HD-Touchscreen
- Einfache, intuitive Bedienung
- Vordefinierte Behandlungsprozeduren
- Hohe Mobilität und Flexibilität durch kompaktes Desktop-Design

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen.



...evolution continues

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com