


# C-MAC® FIVE S


Calidad suprema para un solo uso

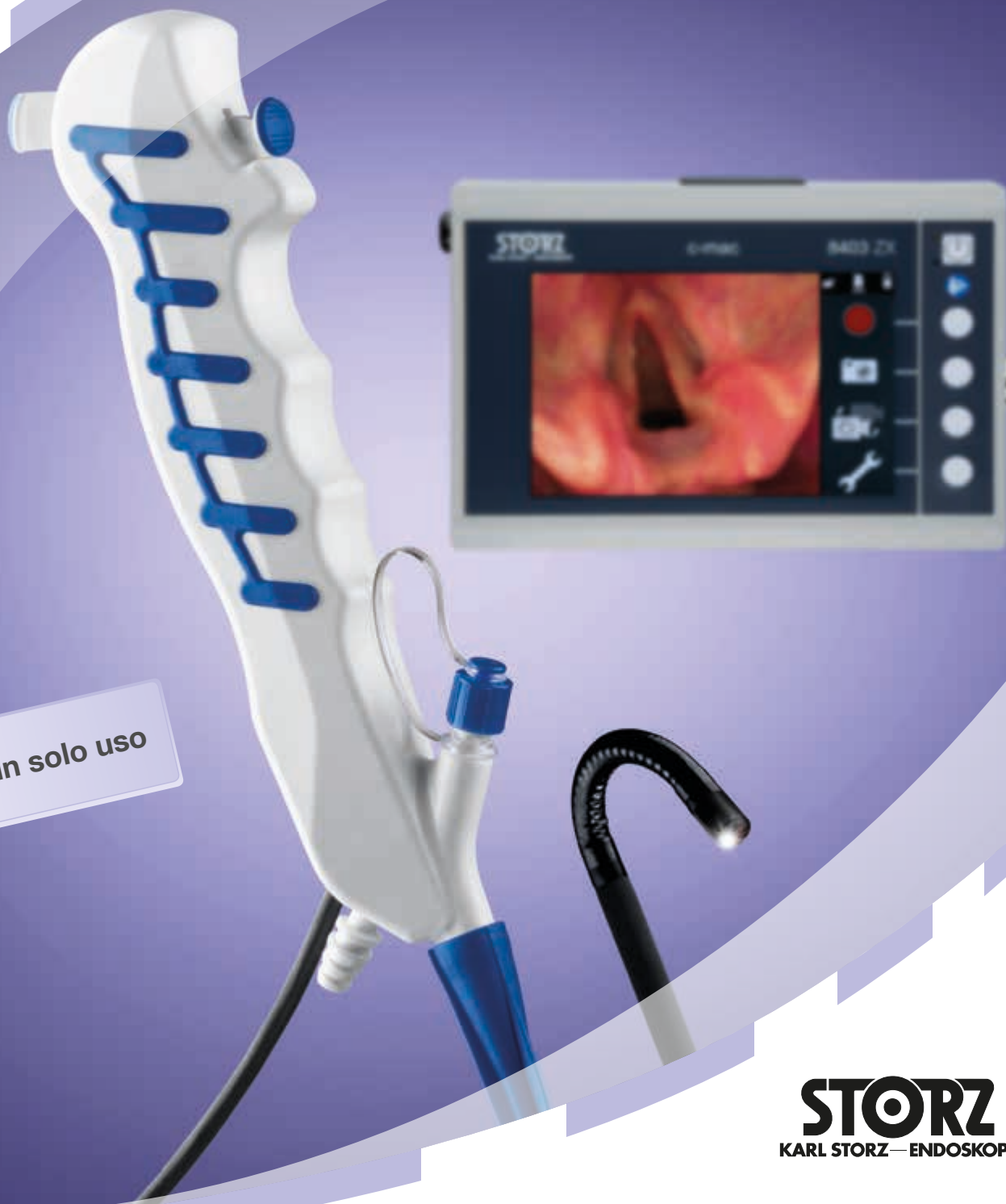

Para un solo uso

# C-MAC® FIVE S

## Videoescopio flexible de intubación para un solo uso

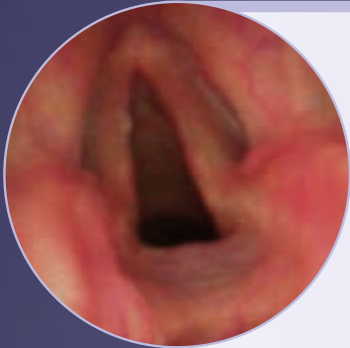

### Excelente calidad de imagen

- El chip CMOS es idéntico al utilizado en los videoendoscopios FIVE reutilizables
- El LED luminoso situado en el extremo distal garantiza una iluminación homogénea del campo de trabajo
- Imágenes de vídeo en formato 4:3 – desaparece la visión en túnel
- Compatible con el monitor C-MAC® y C-HUB® II



### Ergonomía adaptada a su gestión de las vías respiratorias

- Vaina especialmente rígida que facilita el manejo
- Tubo ETT con excelentes propiedades de deslizamiento gracias al material de la vaina
- Para colocar tubos endotraqueales (ETT) a partir de 4 mm de tamaño
- Para controlar la posición de los tubos de doble lumen (DLT)
- Para examinar las vías respiratorias
- Geometría especial del endoscopio que facilita la fijación del tubo



### El monitor C-MAC®

- Pantalla de 7" TFT Wide View Angle (160°) con calidad de imagen mejorada
- Conmutación rápida entre diferentes fuentes de vídeo conectadas, como por ejemplo, entre los videolaringoscopios C-MAC® S
- Documentación y grabación de datos en tarjeta SD y memoria USB
- Salida HDMI para conectar un monitor externo
- Adaptación inmediata de la luminosidad a las condiciones ambientales



### El sistema C-MAC®

- Sistema compatible con todos los componentes C-MAC® (anteriores y posteriores)
- Conecte los videolaringoscopios C-MAC® y C-MAC® S, FIVE o bien C-MAC® VS así como C-CAM® para trabajar con todos los endoscopios con ocular

## ¡Mantenga sus altas exigencias!

La calidad de imagen de los nuevos C-MAC® FIVE S para un solo uso es tan excelente como la calidad del sistema C-MAC®. La rigidez de la vaina y el protector especial antitorción situado en el extremo distal garantizan un manejo igual de fácil que con los videoendoscopios FIVE reutilizables.

Si Ud. está interesado en tener un sistema completo para la gestión de las vías respiratorias, la mejor solución es:

### El sistema C-MAC®

Ahora disponibles



Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.



La evolución continúa

**STORZ**  
**KARL STORZ—ENDOSKOPE**

*THE DIAMOND STANDARD*

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania  
Teléfono: +49 (0)7461 708-0  
Fax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)