

CleverCurve – Schiebeschäftinstrumente für die Thoraxchirurgie




CleverCurve – Schiebeschafftinstrumente für die Thoraxchirurgie

Über die vergangenen Jahre hat sich die Thoraxchirurgie von hauptsächlich offenen Eingriffen hin zu einer minimal-invasiven Herangehensweise weiterentwickelt. Alles, was bei einem offenen Eingriff mit den Händen abgetastet werden kann, muss in der video-assistierten Technik vom Instrumentarium übernommen werden.

KARL STORZ hat diesen Trend frühzeitig erkannt und nun das bestehende Portfolio um die neue CLEVERCURVE Linie ergänzt. Die Instrumente sind auf der Grundlage der Schiebetechnik konzipiert, welche sich durch ein passives, feststehendes sowie ein aktives, bewegliches Element auszeichnet. Aufgrund der hieraus resultierenden direkten Kraftübertragung vom Handgriff auf das Maulteil wird ein gutes taktiles Feedback für den Anwender erreicht.

Insgesamt besteht die Linie aus sieben Instrumenten mit unterschiedlichen Maulteildesigns, teilweise versehen mit einer chirurgischen Raste.

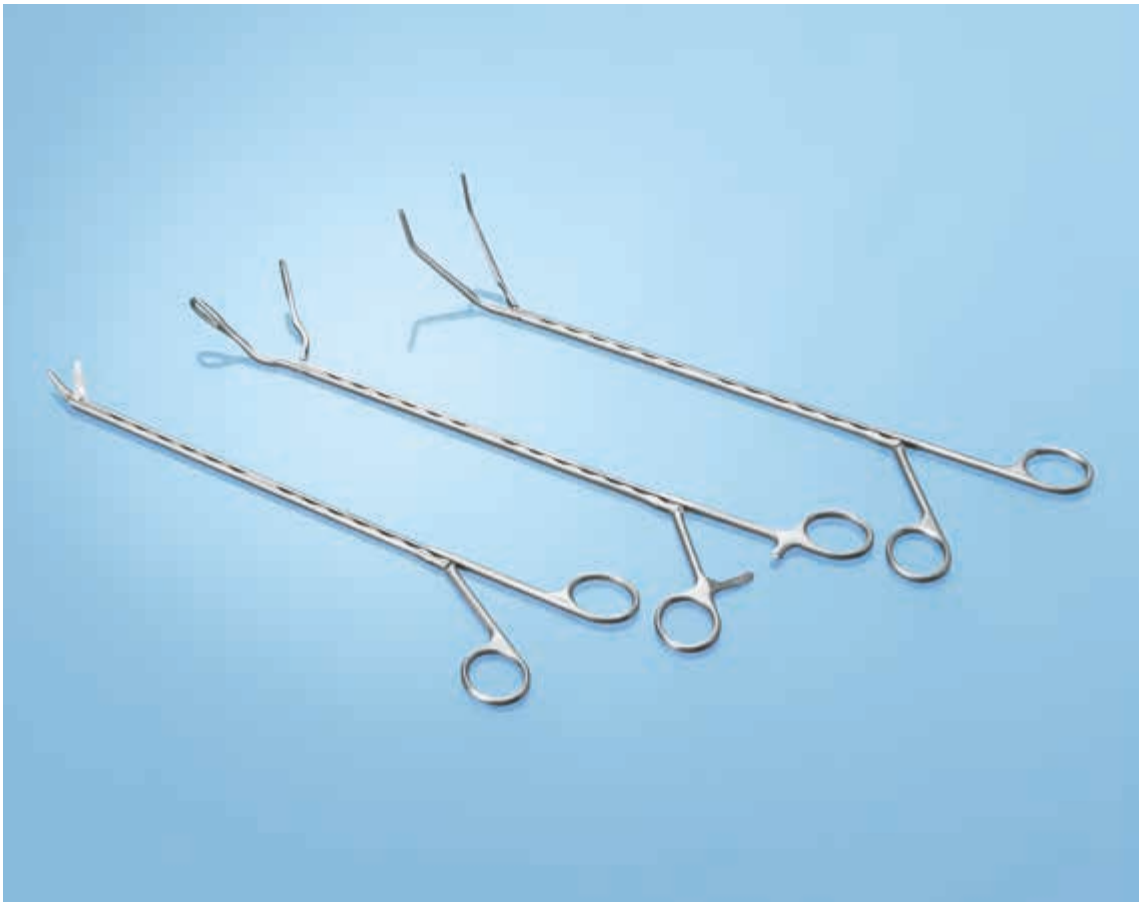

CleverCurve: Besondere Merkmale a



Stabile und zugleich
filigrane Maulteilfehrung

Gutes taktiles Feedback
beim Greifen von Gewebe

Schlanker
5 x 7 mm

Einfache und verbesserte
Reinigung der Schaft-
zwischenräume durch
wellenförmiges Design

Die CLEVERCURVE Schiebeschäftinstrumente verfügen über ein besonderes Feature: das wellenförmige Design am feststehenden Schaft.

Die offene, durchlässige Bauweise ermöglicht eine effiziente Aufbereitung des kompletten Schafts und dies ganz ohne aufwendiges Zerlegen.


Zusätzlich reduziert die spezielle Form die Reibung zwischen den beiden Schäften. Dies schafft die Grundlage für ein präzises und flüssiges Arbeiten des Operateurs.

auf einen Blick

Schaft:

Unkompliziertes Handling –
kein Zerlegen notwendig

Direkte Kraftübertragung
vom Handgriff auf das
Maulteil

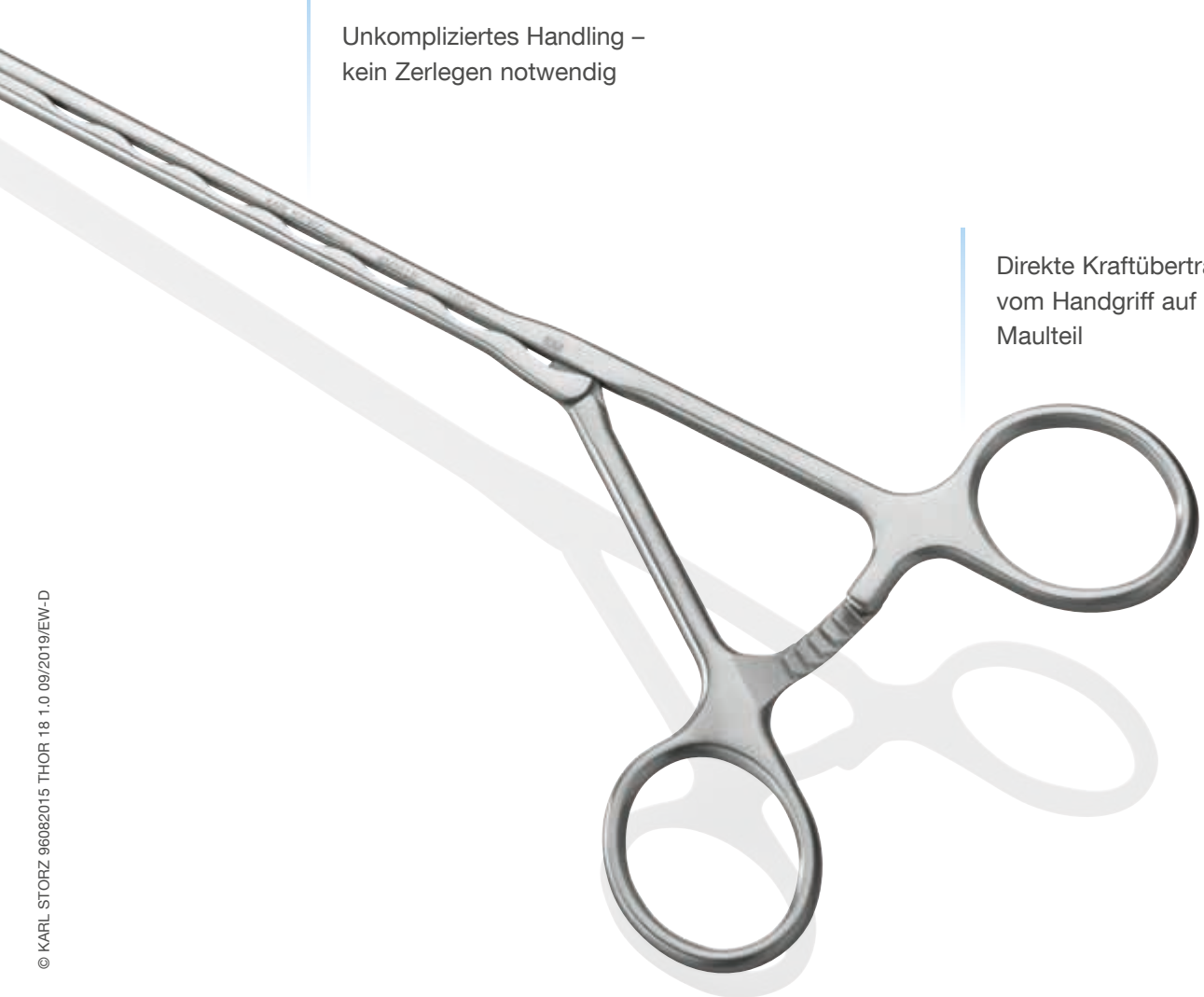

Lungenfasszangen



40410 LF

Lungenfasszange, Schiebeschaft, atraumatisch, ein Maulteil beweglich, Maulteile gebogen, aufgewölbt und gefenstert, mit chirurgischer Raste, Länge 28 cm



40410 LL

Lungenfasszange, Schiebeschaft, atraumatisch, ein Maulteil beweglich, löffelförmige Maulteile, Länge 28 cm



40410 LR

Lungenfasszange, Schiebeschaft, atraumatisch, ein Maulteil beweglich, Maulteile gebogen, aufgewölbt und oval gefenstert, mit chirurgischer Raste, Länge 28 cm

Schere



40410 LC

Schere, Schiebeschaft, ein Scherenblatt beweglich, Scherenblätter distal 15° abgewinkelt, Länge 24,5 cm

Präparierklemmen



40410 LH

Präparierklemme, Schiebeschäft, atraumatisch, ein Maulteil beweglich, Maulteile distal 90° abgewinkelt, Länge 28 cm



40410 LS

Präparierklemme, Schiebeschäft, atraumatisch, ein Maulteil beweglich, Maulteile doppelt gebogen, Länge 28 cm



40410 LG

Präparierklemme, Schiebeschäft, atraumatisch, ein Maulteil beweglich, Maulteile gebogen, Länge 28 cm



STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com