


Almofada de pré-aquecimento para endoscópios
descartável*




Almofada de pré-aquecimento para endoscópios descartável*

Para aquecer o endoscópio e evitar o embaçamento da ótica

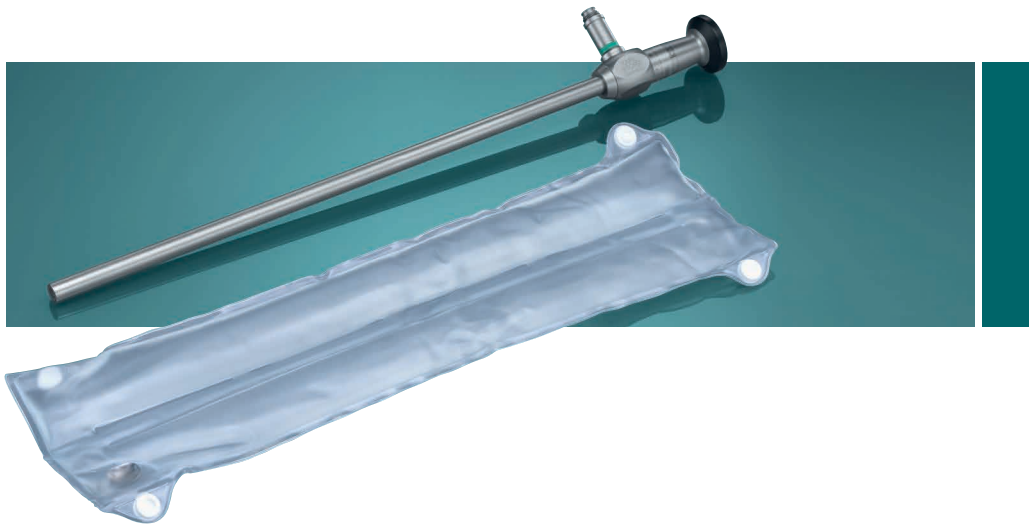

O embaçamento do endoscópio é um problema recorrente no cotidiano clínico. A temperatura ambiente média na sala de cirurgia é de 20 °C, enquanto a temperatura do paciente é de cerca de 37 °C. Esta diferença entre temperatura ambiente e temperatura corporal provoca muitas vezes um embaçamento do endoscópio durante sua introdução no interior do corpo, comprometendo consideravelmente a visibilidade do cirurgião. As almofadas de pré-aquecimento para endoscópios descartáveis* da KARL STORZ representam uma boa alternativa para eliminar esse inconveniente.

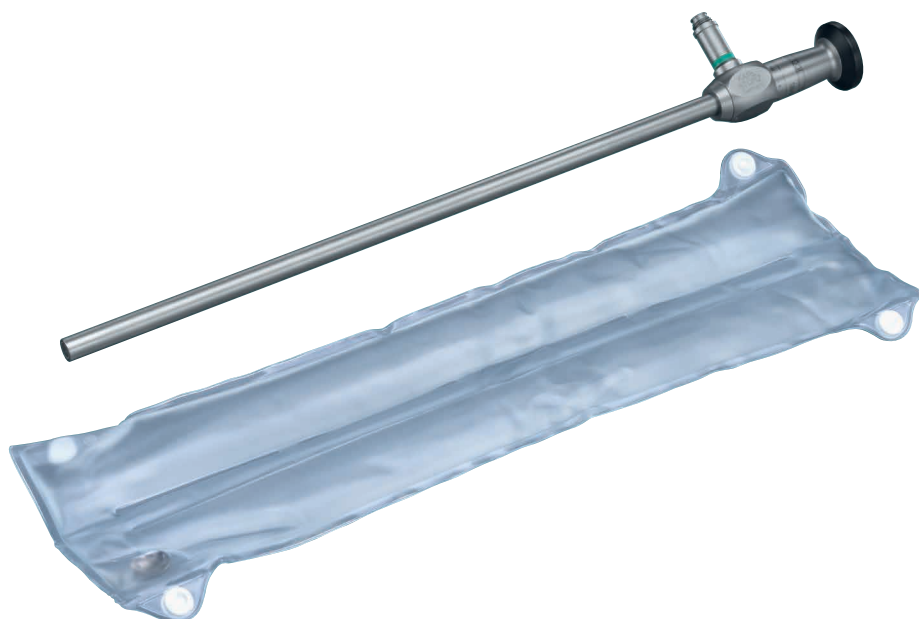

Características do produto

- A almofada de pré-aquecimento para aquecer o endoscópio é ativada através de uma plaqueta de metal
- Indicado para todos os endoscópios rígidos
- Disponível em dois tamanhos (12 x 20 cm e 12 x 36 cm)
- Dispensa qualquer outra fonte de calor (eletricidade, água quente, etc.)
- O produto é fornecido estéril, podendo ser utilizado imediatamente
- Possibilita o pré-aquecimento simultâneo de dois endoscópios em uma mesma almofada de aquecimento

Utilização da almofada de pré-aquecimento para endoscópios


1. Posicionar o endoscópio no centro da almofada de pré-aquecimento e fechá-la utilizando os botões de pressão.



2. Girar a plaqueta de metal para ativar a almofada de pré-aquecimento.
Para a obtenção de melhores resultados, recomenda-se ativar a almofada de pré-aquecimento aproximadamente 5 minutos antes da utilização do endoscópio.



Tamanhos disponíveis

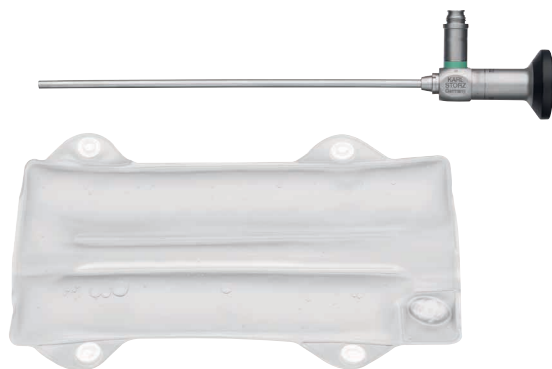


- 100120-15 **Almofada de pré-aquecimento para endoscópios, 12 x 20 cm, estéril, descartável***, embalagem com 15 unidades, para utilização com todos os endoscópios rígidos convencionais com sistema ótico de tamanho apropriado para a almofada



- 100121-10 **Almofada de pré-aquecimento para endoscópios, 12 x 36 cm, estéril, descartável***, embalagem com 10 unidades, para utilização com todos os endoscópios rígidos convencionais com sistema ótico de tamanho apropriado para a almofada

Anotações

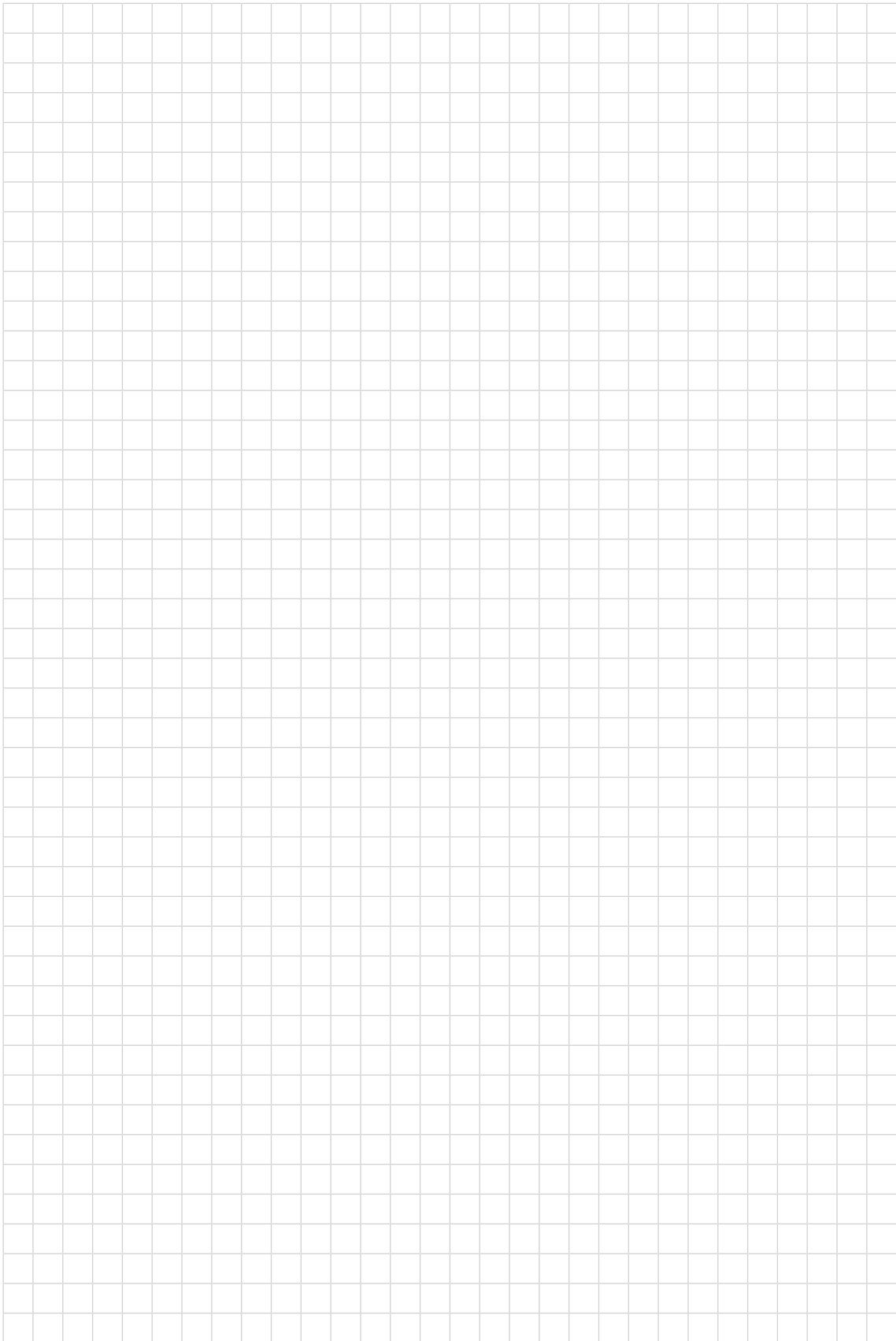

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemanha
Telephone: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

