


Traitement des calculs – CALCULASE® III



Traitement des calculs – CALCULASE® III

Laser holmium de 35 W

Le CALCULASE® III de KARL STORZ est un laser de format compact. Doté d'une puissance de 35 W et de divers modes, ce système laser s'utilise pour des applications variées.

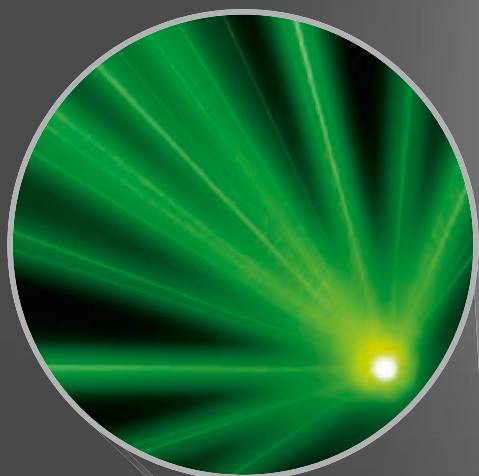

Fibres

- Identification des fibres par radiofréquence (principe RFID)
- Compatibilité descendante avec les fibres du CALCULASE® II
- Fibres à usage unique ou réutilisables (230 µm, 365 µm, 600 µm)

CALCULASE® III – Système laser destiné à la section, la coagulation, l'abscision, la vaporisation et l'ablation de tissus biologiques mous et à la lithotritie de calculs.

Fibre à usage unique ou réutilisable – Destinée à être utilisée avec l'équipement CALCULASE® III.

Il s'agit de dispositifs médicaux de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les notices d'utilisation des produits.



Puissance

- 35 W maximum
- 4 joules maximum
- 30 Hertz maximum



Domaines d'application

CALCULASE® III s'utilise aussi bien pour l'élimination des calculs dans le cadre d'une lithotripsie que pour le traitement des tissus.



Caractéristiques

- Modes pulsatoires renforcés*
 - Court : pour fragmentation des calculs
 - Long : pour dusting
 - « Burst » : pour réduire la répulsion des calculs
- Ecran HD tactile de 10"
- Procédures de traitement pré-programmées
- Appareil compact de type bureau

* Comparé au modèle précédent
CALCULASE® II

Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d'homologation propres à chaque pays.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

Follow KARL STORZ



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : +49 7461 708-105
E-Mail : info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

